

Diversey™

suma® Med Alu

L10

## Sairaalainstrumenttien pesuaine

### Kuvaus tuotteesta

Emäksinen, CE-merkitty, nestemäinen pesuaine erittäin likaisten sairaalainstrumenttien pesuun kaikissa vesiolosuhteissa. Soveltuu myös alumiinille ja herkille metalleille.

### Ominaisuudet

- Turvallinen alumiinille ja herkille metalleille.
- Irrottaa rasvan ja kiinni kuivuneen lian.
- Sopii käytettäväksi kaikissa veden kovuuksissa.
- Tiivistetty tuote on taloudellinen käytössä.
- CE-merkitty.
- Täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit.

### Edut

- Soveltuu pesu- ja desinfektiolaitteissa suoritettavaan sairaalavälineiden, imupullojen yms. pesuun sekä pesuvatien, kaarimaljojen, portatiivien yms. puhdistamiseen huuhtelu- ja desinfektiolaitteissa.
- Sisältää tehokasta pesevää aineosaa ja kompleksointiaineita, jotka takaavat erinomaisen pesutuloksen kaikissa vesiolosuhteissa.
- Soveltuu myös pehmeille metalleille

### Annostus

Suma Med Alu L10:n annostelu tapahtuu automaattisesti Diverseyn annostelulaitteen avulla.


Annostelu alkaen 1 g. litraan vettä veden kovuuden ollessa 0-6 °dH. Toimitamme pyydettäessä suositusannostukset eri veden kovuuksille.

*\*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

### Menetelmä

Annostellaan annostelulaitteen avulla. Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja kosteusvoiteen käyttö on suositeltavaa.

CE

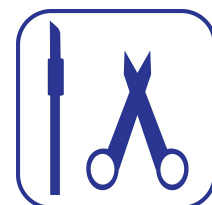



Diversey<sup>TM</sup>

suma<sup>®</sup> Med Alu

L10

#### Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): > 12  
pH-arvo (käyttöliuos): ~ 12  
Suhteellinen tiheys (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.27

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

#### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

#### Yhteensopivuus

Ohjeiden mukaisesti käytettynä Suma Med Alu L10 soveltuu useimmille sairaaloissa tvttaville, tuotteen alkaalisuuden kestäville materiaaleille, myös alumiinille.

#### Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00235)